




Návod k obsluze roztahovače obuvi

Pro nahřívač Formthotics model V20-100/V20-200

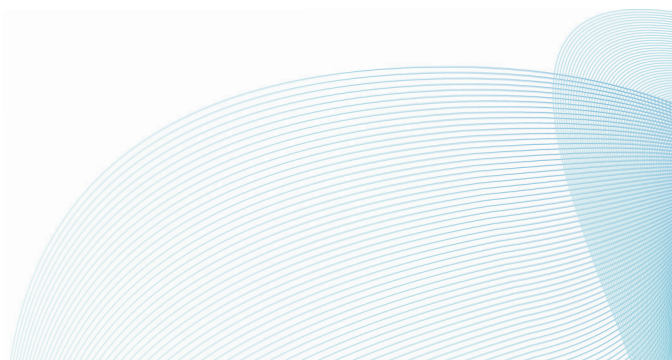

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY V TOMTO NÁVODU I NA PŘÍSTROJI

Při použití tohoto příslušenství s elektrickým spotřebičem byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

VAROVÁNÍ

- 1 Používejte tento roztahovač obuvi pouze ve spojení s nahřívačem Formthotics V20. Tento výrobek není kompatibilní s žádným jiným zařízením.
 - 2 Roztahovač obuvi je při použití a krátce po něm horký. Aby se zabránilo popálení, nedotýkejte se holou pokožkou horkého povrchu.
 - 3 Před sestavením tohoto přístroje si přečtěte všechna varování a návod k použití, který je přiložen k nahřívači Formthotics V20.
 - 4 Provozujte nahřívač Formthotics V20 vybavený roztahovačem obuvi na stabilním rovném povrchu.
-

O NAHŘÍVAČI

Roztahovač obuvi pro nahřívač Formthotics V20 je navržen tak, aby splňoval nejvyšší požadavky na kvalitu a funkčnost.

Je speciálně navržen pro lyžařskou, snowboardovou obuv nebo jinou plně uzavřenou obuv. Při použití ve spojení s nahřívačem Formthotics V20 mírně zahřívá jakékoli stélky Formthotics na optimální teplotu pro tvarové přizpůsobení podle chodidla a obuvi. Má pouze jedno nastavení a je jednoduché ho ovládat.

Obsluha

Krok 1


Uvolněte upínací systém obuvi. Vyměňte z bot všechny případné vložky a vložte do nich stélky Formthotics.

Vložte roztahovač obuvi do jedné z bot v zobrazeném směru tak, aby se dotýkal stélek Formthotic.

Vytáhněte roztahovač obuvi zpět zhruba o 1 cm.

Utáhněte upevňovací systém na botě kolem roztahovače obuvi.


To samé opakujte s druhou botou.

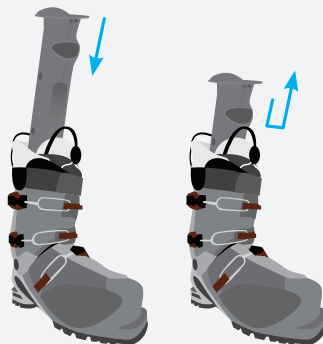

Krok 2

Upevněte botu a roztahovač obuvi do nástavce na nahříváči Formthotics V20, jak je znázorněno.

Hmotnost boty zajistí, že se roztahovač obuvi bezpečně vejde do nástavce.

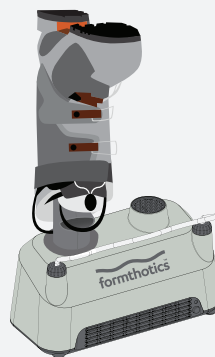

Krok 3

Stiskněte tlačítko Start. Barva LED kontrolky se změní ze zelené na modrou, což signalizuje zahájení zahřívacího cyklu. Po 3 minutách začne LED kontrolka blikat zeleně a ozve se zvukový sygnál. Pro přerušení zahřívacího cyklu stiskněte tlačítko dvakrát.

Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.

Krok 4

Sejměte boty a povolte upevňovací systém tak, aby bylo možné vyjmout roztahovač obuvi.

Poznámka: Výstupní nástavec a konec vloženého roztahovače obuvi bude horký. Vyměňte roztahovač obuvi tak, aby jeho dolní část byla pod nástavcem.

Ihned nasadte boty zákazníkovi a nechte jej v nich stát po dobu 2–3 minut, aby se stélky Formthotics mohly vytvarovat podle jeho chodidla a boty. Vypněte hlavní vypínač.

Přístroj je určen výhradně k zahřívání výrobků Formthotics. Nepoužívejte jej k žádným jiným účelům ani pro jinou značku vložek či stélek.

ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Společnost Foot Science International poskytuje na tento výrobek záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním. Pokud se během tohoto období objeví vada na výrobku, bude výrobek bezplatně opraven nebo vyměněn. Opravu tohoto výrobku nemůže provádět uživatel, předejte ho prosím k servisu v místě dodání.

Likvidace: Zvažte prosím recyklaci nebo vrácení výrobku Foot Science International k demontáži na konci jeho funkčního období.



Foot Science
International

Foot Science International Ltd

26 Dakota Crescent, Sockburn,
Christchurch 8042, Nový Zéland

Telefon **+64 3 348 2115**

Email **info@formthotics.com**

Navštivte stránku **formthotics.com**