




Betjeningsvejledning til støvleforlænger

Til brug sammen med Formthotics Varmemaskine V20-100/V20-200

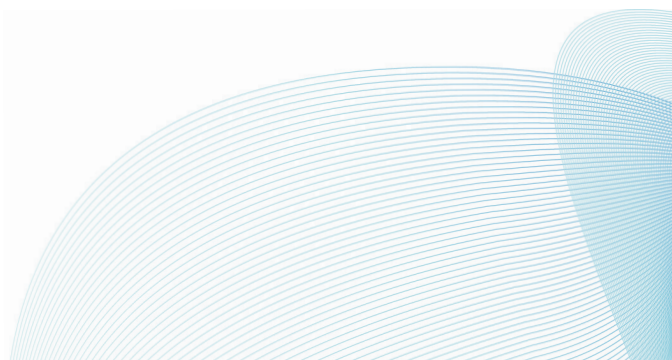

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

FØR APPARATET TAGES I BRUG, LÆS ALLE INSTRUKTIONERNE OG ADVARSELSETIKETTER I DENNE VEJLEDNING OG PÅ APPARATET

Ved brug af dette tilbehør sammen med et elektrisk apparat, burde der altid tages forbehold for forholdsregler inklusivt følgende:

ADVARSEL

- 1 Kun brug støvleforlængerene sammen med Formthotics Varmemaskinen V20. Produktet er ikke kompatibelt med nogen anden enhed.
 - 2 Støvleforlængerer er varmt hvis tændt og holder på varmen et stykke tid efter brug. For at undgå forbrænding, lad ikke bar hud berøre varme overflader.
 - 3 Læs alle advarsler og betjeningsvejledninger som medfølger Formthotics Varmemaskinen V20 før montering af dette produkt.
 - 4 Kun brug Formthotics Varmemaskinen V20 udstyret med støvleforlængere på en solid, jævn overflade.
-

OM OPVARMNINGSMASKINEN

Støvleforlængerer til Formthotics Varmemaskinen V20 er konstrueret til at opfylde de højeste standarder for kvalitet og funktionalitet.

Det er specielt designet til brug med skistøvler, snowboardstøvler eller andet fuldt lukket fodtøj. Når det bruges sammen med Formthotics Varmemaskinen V20, det opvarmer forsigtigt eventuelle Formthotics ortoser til den optimale temperatur for tilpasset afstøbning af foden og fodtøjet. Den har kun en indstilling og er meget brugervenlig.

Betjening


Trin 1

Løsne fastgørelsessystemet på støvlen. Fjerne eventuelle eksisterende skoindlæg og indsætte Formthotics ind i støvlerne.

Indsæt en støvleforlænger i en af støvlerne i den viste retning indtil slutningen af støvleforlængerens støvleforlængerer rører ved Formthotics'en. Træk støvleforlængerens tilbage med cirka 1 cm.


Stram fastgørelsessystemet på støvlen rundt om støvleforlængerens.

Gentag med den anden støvle.

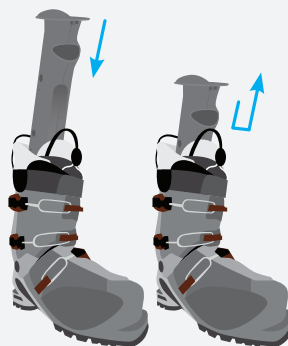

Trin 2

Sæt støvlen og støvleforlængerens på udgangene af Formthotics Varmemaskinen V20 som vist. Støvlens vægt vil sikre støvleforlængerens passer sikkert på udgangen.

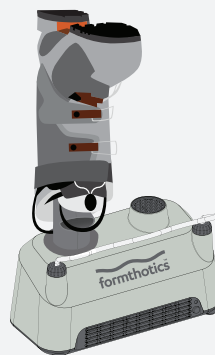

Trin 3

Tryk på Start knappen. LED indikatoren vil skifte fra grøn til blå for at indikere at varmeprocessen er startet. Efter 3 minutter vil LED indikatoren begynde med at blinke grøn og der vil være en summe lyd. Tryk på knappen to gange for at genstarte opvarmningscyklussen.

Efterlad ikke maskinen uden opsyn mens den opererer.

Trin 4

Fjern støvlerne og løsne fastgørelsessystemet for at tillade fjernelse af støvleforlængerens.

Bemærk: Udstødningsudløbet og den indsatte ende af støvleforlængerens er varmt. Fjern støvleforlængerens ved at holde bunden af forlængerens under udgangen.

Tilpasse støvlerne omgående til kundens fødder og få dem til at stå oppe i 2-3 minutter for at tillade Formthotics at forme sig til formen af foden og skoen. Sluk på sluk knappen. **Denne maskines eneste funktion er at varme Formthotics produkter. Brug ikke maskinen til nogen andre formål eller enhver anden mærke af ortopædisk fodindlæg eller skoindlæg.**

GARANTI & SERVICE POLITIK

Foot Science International garanterer dette produkt mod eventuelle defekter som følge af fejlagtigt materiale eller håndværk i en toårig periode fra købsdaten. Garantien inkluderer ikke skade pålagt som følge af fejlagtigt brug. Hvis produktet går i stykker i denne periode, vil vi reparere eller erstatte det gebyrfrit. Dette produkt kan ikke serviceres af brugeren, returnere venligt til udbyder for service.

Bortskaffelse: Overvej venligst genbrug eller returnering af dette produkt til Foot Science International for demontering for enden af dens funktionsdygtige levealder.



Foot Science
International

Foot Science International Ltd
26 Dakota Crescent, Sockburn,
Christchurch 8042, New Zealand

Telefon **+64 3 348 2115**

Email **info@formthotics.com**

Besøg **formthotics.com**