




Talpbetét használati útmutató

A V20-100/V20-200-as Formthotics Melegítő Gép használatához

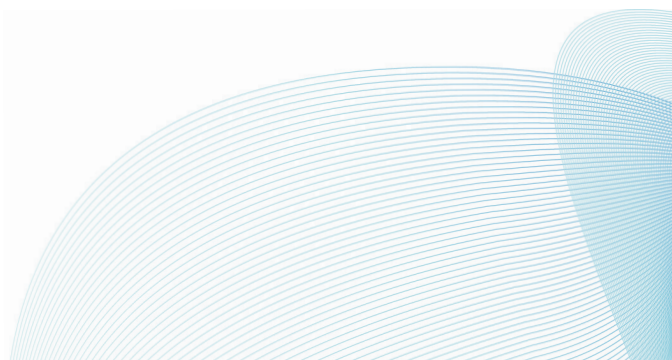

FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

MIelőTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A TERMÉKET, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÚTMUTATÓT ÉS A FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEKET A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓN ÉS AZ ESZKÖZÖN

Ha ezt a kelléket elektromos eszközzel használja, fontos, hogy az alapvető óvintézkedéseket kövesse, melyek a következők:

FIGYELEM

- 1 Ezt a talpbetétet csak a Formthotics V20-as Melegítő Géppel együtt használja. Ez a termék nem kompatibilis semmilyen más lábbelivel.
 - 2 A talpbetét használatkor igen meleg. Hogy elkerülje az égési sérüléseket, ne érintkezzen csupasz bőr a forró felülettel.
 - 3 Olvassa el valamennyi figyelmeztető és használati leírást, beleértve a Formthotics V20-as Melegítő Gépet is, mielőtt felpróbálná az eszközt.
 - 4 A Formthotics V20- as Melegítő Gépet a talpbetéttel mindig csak stabil és sík felületen használja.
-

A MELEGITŐ GÉPRŐL

A Formthotics V20-as melegítő géphez készített talpbetét a legmagasabb minőségi és működési követelményeknek megfelelően lett kialakítva.

Kifejezetten sí csizmák, hódeszka csizmák és egyéb teljesen fedett lábbelik használatához tervezték. Amikor a Formthotics V20-as melegítő géppel együtt használja, gyengéden melegíti fel bármelyik Formthotics talpbetétet a megfelelő hőmérsékletre a láb, illetve lábbelihez személyre szabottan. Mindössze egyetlen beállítása van és nagyon egyszerű használni.

Használat


1. lépés

Engedje ki a lábbeli rögzítését, távolítsa el a benne lévő betétet és helyezze be a Formthotics-ot.

Helyezze be a talpbetétet a lábbelik egyikébe, ahogy a képen szerepel egészen a lábbeli végéhez, amíg el nem éri a Formthotic-ot. Húzza vissza kb. 1 centiméternyire a talpbetétet.


Húzza meg a rögzítést a lábbelin a talpbetét körül.

Ismételje meg ezt a másik pár lábbelivel.

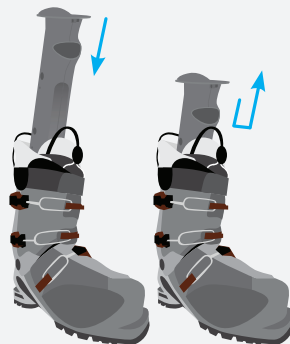

2. lépés

Csatolja a lábbelit és a talpbetétet a Formthotics V20-as Melegítő Gép kivezető nyílásához a képi leírás alapján. A lábbeli súlya biztosítani fogja, hogy a talpbetét biztonságosan illeszkedjen a kivezető nyíláshoz.

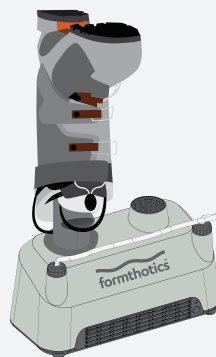

3. lépés

Nyomja meg a Start gombot. A LED-es lámpa zöldről kékre fog változni, mely azt jelzi, hogy a melegítési folyamat elkezdődött. 3 perc múlva a LED-es lámpa zölden kezd el világítani és egy berregő hangot fog hallani. Nyomja meg kétszer a gombot, ha újra szeretné indítani a melegítési folyamatot.

4. lépés

Vegye le a lábbelit és oldja ki a rögzítést, hogy el tudja távolítani a talpbetétet.

Figyelem: a légtelenítő nyílás és a talpbetét behelyezett vége forró lehet. Távolítsa el a talpbetétet a a betét aljának elmozdításával a kivezető nyílás alatt.

Rögzítse a lábbelit a felhasználóhoz azonnal és álljon benne 2- 3 percig, hogy lehetővé tegye, hogy a Formthotics felvegye a láb és a cipő megfelelő formáját. Kapcsolja ki a készüléket.

Ez a gép kizárólag csak a Formthotics termékek felmelegítésére szolgál. Ne használja a gépet semmilyen más célra vagy egyéb más márkájú lábbelihez vagy talpbetéthez.

GARANCIA ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

A Nemzetközi Lábtudományos Egyesület a vásárlástól számított két évre teljeskörű garancát vállal minden hibás anyagból vagy rossz kivitelezésből eredő hibára. A garancia nem vonatkozik a hibás használatból eredő károkra. Amennyiben a termék ezen időszak alatt hibásodna meg, a terméket ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük. Ez a termék nem javítható a felhasználó által, kérjük küldje vissza a terméket a szolgáltatóhoz.

Megsemmítés: Kérjük, hogy hasznosítsa újra vagy küldje vissza a terméket szétszedésre a Nemzetközi Lábtudományos Egyesülethez, miután az már nem használható tovább.



Foot Science
International

Foot Science International Ltd

26 Dakota Crescent, Sockburn,
Christchurch 8042, Új- Zéland

Telefon **+64 3 348 2115**

Email cím **info@formthotics.com**

Látogassa meg weboldalunkat **formthotics.com**