




Instrukcje obsługi poszerzacza obuwia

Do użytku z podgrzewaczem Formotics V20-100/V20-200

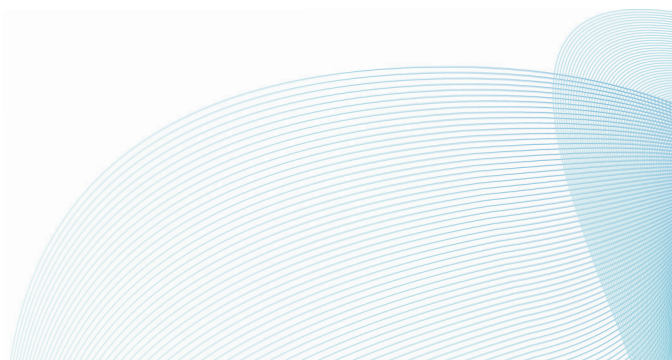

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI I OSTRZEŻENIAMI TEJ ULOTKI ORAZ ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA SAMYM URZĄDZENIU.

Podczas używania tego produktu z urządzeniem elektrycznym należy zawsze przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

Uwaga

- 1 Poszerzacz obuwia może być używany wyłącznie z podgrzewaczem Formthotics Heating Machine V20. Ten produkt jest niekompatybilny z żadnym innym urządzeniem.
 - 2 Poszerzacz obuwia jest gorący w czasie użycia i przez jakiś czas po użyciu. Aby uniknąć poparzenia nie dotykaj gorących powierzchni.
 - 3 Przed użyciem należy przeczytać wszystkie uwagi i instrukcje załączone z Formthotics Heating Machine V20.
 - 4 Używaj Formthotics Heating Machine V20 z zainstalowanym poszerzaczem obuwia wyłącznie na stabilnej i płaskiej powierzchni.
-

UWAGI DOTYCZĄCE POSZERZACZA

Poszerzacz obuwia do podgrzewacza Formthotics Heating Machine V20 jest wyprodukowany według najwyższych standardów jakości i funkcjonalności.

Jest on specjalnie zaprojektowany do użytku w butach narciarskich, w butach do snowboardingu albo do innego wodoszczelnego obuwia. Używany z podgrzewaczem Formthotics Heating Machine V20, lekko podgrzewa wkładki firmy Formthotics do optymalnej temperatury aby dopasować je do stopy i obuwia klienta. Ma tylko jedno ustawienie i jest bardzo łatwy w użyciu.

OBSŁUGA


Punkt 1

Poluzuj zapięcie lub sznurówki obuwia. Usuń obecne wkładki i włóż do butów wkładki Formthotics.

Włóż poszerzacz obuwia do jednego z butów jak pokazano, tak aby poszerzacz dotykał wkładki Formthotic. Przesuń poszerzacz do tyłu o 1 cm.


Zacieśnij but wokół poszerzacza przez zapięcie lub zasnurowanie buta.

Powtórz to samo z drugim butem.

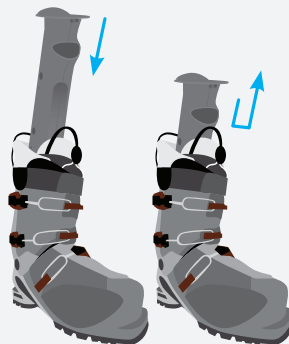

Punkt 2

Założ but i poszerzacz na Formthotics Heat Machine V20, jak pokazano. Ciężar buta zapewni dokładne dopasowanie do wylotu podgrzewacza.

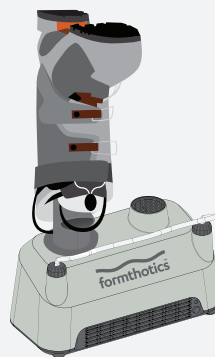

Punkt 3

Naciśnij guzik Start. Światelko LED zmienia kolor z zielonego na niebieski oznaczając, że podgrzewanie się zaczęło. Po 3 minutach światelko LED zacznie migać na zielono i zabrzmi brzęczyk. Naciśnij guzik dwa razy aby ponownie zacząć podgrzewanie.

Nie pozostawiaj maszyny samej podczas użycia.

Punkt 4

Zdejmij buty z podgrzewacza i poluzuj zapięcie aby wyjąć poszerzacz.

Uwaga: Wylot i końcówka podgrzewacza będą gorące. Wyjmij poszerzacz trzymając dół podgrzewacza poniżej wylotu.

Natychmiast załóż buty klientowi i poczekaj 2-3 minuty aby wkładki Formthotics dopasowały się do kształtu stopy i buta. Wyłącz prąd. **To urządzenie służy wyłącznie do podgrzewania wkładek Formthotics. Nie używaj tego urządzenia do innych celów ani do wkładek ortopedycznych innych firm.**

GWARANCJA I SERWIS

Foot Science International gwarantuje ten produkt na wypadek uszkodzeń i wadliwego materiału lub wykonania na okres 2 lat od daty zakupu. Gwarancja nie pokrywa zniszczeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie. Jeśli produkt zostanie uszkodzony podczas okresu gwarancji, naprawimy go bez opłaty. Ten produkt nie może być naprawiany przez użytkownika. Prosimy o zwrot produktu do dostawcy w celu naprawy.

Pozbycie się urządzenia: Prosimy o rozważenie recyklingu lub o zwrot tego produktu do Foot Science International w celu rozbiórki po zakończeniu używalności.



Foot Science
International

Foot Science International Ltd
26 Dakota Crescent, Sockburn,
Christchurch 8042, Nuova Zelanda

Telefono+64 3 348 2115

Email info@formthotics.com

Zobacz formthotics.com